

## Kalibrering

Ved kalibrering se fabrikantens brugsanvisning eller kontakt Liko.




## Brugsvejledning\*

7DK160175-04  
2009-08-10

## Tekniske oplysninger

<b>Nøjagtighedsklasse:</b>	Klasse III iht. NAWI 90/384 EEC-direktivet
<b>Opløsning:</b>	0,2 kg
<b>Nøjagtighed:</b>	10-99.9 kg +/- 0.2 kg 100-350 kg +/- 0.4 kg
<b>Maks. belastning:</b>	350 kg
<b>Min. belastning:</b>	10 kg
<b>Nulstilling:</b>	Nulstillingsknap (0)
<b>Strømforsyning:</b>	Batteri 9 V
<b>Batteri:</b>	9 V Alkaline (PP3, MN1604, 6LR61,E- block). Rækker til ca. 3.000 aflæsninger
<b>Display</b>	Digital, flydende krystaller (LCD)
<b>Størrelse:</b>	76 x 76 x 134 mm (B x L x H)
<b>Egenvægt:</b>	0,575 kg
<b>Temperaturområde:</b>	+5° C til +35° C
<b>Luftfugtighed:</b>	0 - 95 %
<b>Tyngdekraftområde:</b>	2

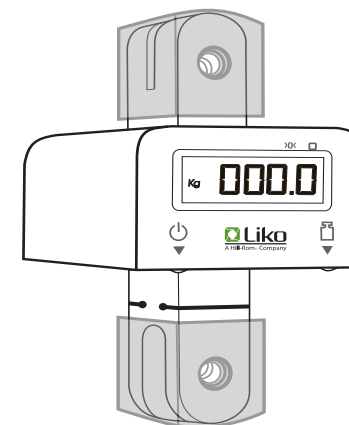

**LikoScale 350**  
Varenr. 3156228

LikoScale 350 er en praktisk vægt, der er beregnet til at veje brugere i mobile eller stationære lifte fra Liko. Sammen med Likos lifte og løftetilbehør tilbyder LikoScale 350 en enkel, bekvem og sikker vejning.

Vægtens måleværdi aflæses på et display. Vægten vises i kg.

LikoScale 350 er godkendt iht. det europæiske direktiv NAWI 90/384 (Non Automatic Weighing Instruments). Vægten må kun anvendes sammen med godkendte lifte og løftetilbehør i overensstemmelse med instruktionerne i denne brugsvejledning.

### LikoScale 350 kan anvendes med følgende personlifte fra Liko:

#### Viking (S, M, L, XL)

- Ledadapter 12 mm, varenr. 2016504 kræves.

#### Uno (samtlige modeller)

- Uno med serienummer fr.o.m 31825.

Ledadapter 12 mm, varenr. 2016504 kræves.

- Uno med serienummer t.o.m 31824.

Ledadapter 8 mm, varenr. 2016502 kræves.

#### Golvo (samtlige modeller)

#### Likorall (samtlige modeller)

#### Multirall (samtlige modeller)

#### Liko MasterLift (samtlige modeller)

*Eftersom løftehøjden begrænses ved anvendelse af LikoScale i kombination med LikoLight eller Viking XS, anbefaler vi ikke disse kombinationer.*

\* Denne brugsvejledning er et supplement til den komplette dokumentation, der er udgivet af vægtens fabrikant. Vores hensigt med denne anvisning er at gøre det nemmere for vores kunder at anvende LikoScale i kombination med Likos produkter. For detaljerede oplysninger om vægten henviser vi til fabrikantens brugsanvisning (vedhæftet).

Copyright © Liko AB 2009-08



A Hill-Rom Company

[www.liko.com](http://www.liko.com)

### Forhandler:

Liko AB  
SE-975 92 Luleå  
Sweden  
info@liko.se

### Fabrikant:

SR Instruments, Inc  
600 Young Street  
Tonawanda, NY 14150  
USA



#### Inden montering kontrollér, at følgende dele findes:

- Værktøjssæt, 2 skruer, 2 låsemøtrikker
- 2 hylstre
- Batteri
- Brugsvejledning fra Liko
- Kalibreringscertifikat
- Overensstemmelseserklæring
- Brugsanvisning fra fabrikanten
- EU-typegodkendelse

## Montering/udskiftning af batteri


Til LikoScale 350 medfølger et 9 V batteri, som rækker til ca. 3.000 aflæsninger.

#### Montering af batteri:

1. Åben dækslet på bagsiden af vægten.
2. Montér batteriet.
3. Luk dækslet.

Når batteriet skal udskiftes, vises et billede af et batteri oppe i venstre hjørne på displayet.

**OBS!** Opbrugte batterier afleveres til den nærmeste genbrugsstation til genvinding.

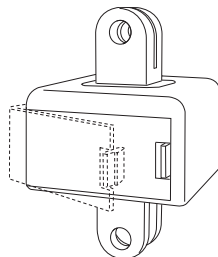


## Monteringsanvisning

Følg monteringsanvisningen til den aktuelle Liko lift.

#### Likorall, MasterLift, Golvo: Fast montering

Anvend altid et af hylstrene, der leveres med vægten.


1. Afmontér løftetilbehøret fra liften.
2. Placér et hylster på vægtens nederste fæstepunkt. Montér løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.
3. Montér vægten på liften vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.

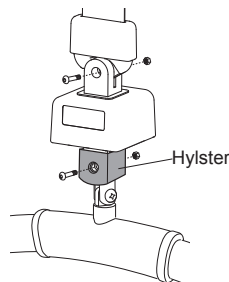

#### Viking, Uno: Fast montering, med ledadapter

Anvend altid 2 hylstre, der leveres med vægten.

1. Afmontér løftetilbehøret fra liften.
2. Montér ledadapteren (se foregående side) på liften, iht. den separate monteringsanvisning.
3. Placér et hylster på vægtens nederste fastgørelsespunkt. Montér løftetilbehøret under vægten vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.
4. Placér et hylster på vægtens øverste fastgørelsespunkt. Montér vægten i ledadapteren på liften vha. de medfølgende skruer og låsemøtrikker.

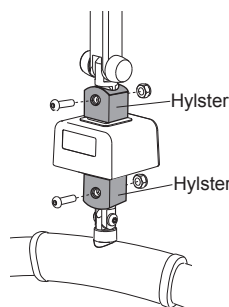


**△ Ved afmontering af vægten skal ledadapteren også afmonteres fra liften, inden der igen monteres løftetilbehør på liften.**

#### Multirall, Likorall 200/R2R: montering med snapkobling

Til montering af LikoScale i (Q-Link) snapfæste, kræves Adapter kit LikoScale varenr. 3156232.

Anvend altid et af hylstrene, der leveres med vægten.

Montér Adapter kit LikoScale iht. den separate monteringsanvisning.

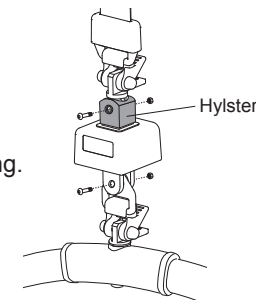

## Håndtering

Det almindelige anvendelsesområde for LikoScale 350 er temperaturer mellem +5° C og +35° C samt en relativ luftfugtighed, som ikke overstiger 95 %.

Vægten bør ikke opbevares i temperaturer, der er lavere end -20° C eller højere end +50° C.





Ved opbevaring længere end 6 måneder bør batteriet fjernes. Følg instruktionerne til montering/udskiftning af batteri.

Kontrollér inden vejning, at vægten er monteret iht. monteringsanvisningen på side 2-3.

**△ Inden løft kontrollér da, at løftetilbehøret hænger vertikalt og uhindret kan bevæge sig.**

#### Vejning med LikoScale 350

Vægten kan nulstilles enten med eller uden løftesejl. Såfremt vægten nulstilles, uden at løftesejlet hænger på løftebøjlen, vil løftesejlets vægt indgå som en del af resultatet ved vejning af brugeren. Løftesejlets vægt skal da modregnes for at få den korrekte brugervægt. Nedenfor beskrives nulstilling med løftesejl.

1. Montér løftesejlet på løftebøjlen.
2. Vægten startes ved at trykke på knappen .
3. Vægten nulstilles ved at trykke på knappen .  
En brudt linje vises på displayet et par sekunder efter, at vægten nulstilles. Når vægten er klar, vises værdien "0.0" i displayet.  
**Obs! Vægten kan ikke nulstilles med en vægt på over 35 kg.**
4. Afmontér løftesejlet fra løftebøjlen og påsæt løftesejlet på brugeren iht. brugsanvisningen, der leveres med løftesejlet og personliften. Montér løftesejlet til løftebøjlen.
5. Hæv løftebøjlen, så brugeren letter fra underlaget. Husk aldrig at løfte brugeren højere end nødvendigt.
6. Når løftebevægelsen er stabiliseret, trykkes på knappen . Brugers vægt kan nu aflæses på displayet. Vægten slås automatisk fra efter ca. 60 sekunder. Tryk da på knappen , såfremt yderligere aflæsninger ønskes.
7. Sænk brugeren forsigtigt og afmontér løftesejlet.